




安全にご使用するための注意

- 照射中に**熱過ぎる**と感じた際は、照射を中止し、本体を**肌から離して**ください。
熱さを我慢して使用すると肌**に悪影響**を与える恐れがあるため、注意してください。
- **連続して照射**する際は、**10 秒以上**間隔をあけてください。

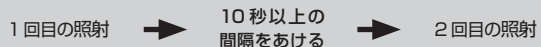

- 連続して使用していると**本体が熱く**なることがあります。
熱いと感じた際は、**30 秒～ 60 秒**ほどトリートメントを中止し、本体が**冷めるまで**お待ちください。

オーバートリートメントについて

- 一度のトリートメントで、同じ部位に**2 回を超えて照射**することは肌**に悪影響**を与える恐れがあるため、**おやめ**ください。

no!TM
no!
SKIN

Quick Guide
クイックガイド



本書はクイックガイドです。
製品を使用する前に、必ず取扱説明書を読んだ上で
注意事項を守って使用してください。

充電についての注意

- 購入後初めて使用する場合や、長時間使用しなかった場合は必ず6時間以上充電してください。
- 通常の充電は、表示ランプが緑点灯になるまで(約3時間)充電してください。
- ACアダプターの電源スイッチをONにした後、10秒ほどは充電が開始されませんが故障ではありません。
スタンバイの時間ですので、少々お待ちください。
- ACアダプターをつないだ状態での照射はできませんが故障ではありません。
トリートメントの際はACアダプターを抜いてから使用してください。



注意



1 カバーをはずす



2 気になるポイントに当てる



3 ボタンを押す



4 10秒間光をあてる

※熱過ぎると感じたら途中で肌から離す。



5 アラームがピーと2回鳴った後に肌から本体を離す

6 照射した部位にクリアジェル^(※)を塗る

(※) クリアジェル(薬用ジェルK)はニキビを防ぎ肌をすこやかに保つ医薬部外品の化粧水です。
(※) STA-101Wには付属していません。

 連続して照射する際は、10秒以上間隔をあげる

※ 一度のトリートメントで同じ部位への照射は2回まで