

全身ケア

約4分※1

レイボーテ Rフラッシュ PLUS for Salon

販路限定品

価格 ¥74,800(税込)



長寿命ランプ 約60万発※3

ボディケア回数
最大約1050回分※2

ストレス
フリー

ローラーを滑らせるだけのスピーディケア！

お肌の上を転がりながら移動距離を自動で感知する「ローラー連射機能」を搭載。照射もれやオーバーケアを抑えながら、圧倒的スピードで全身をケアできます。

独自技術 レイボーテフラッシュ



ローラー

フェイス



両脇



両腕



ビキニライン



フェイス
&
スポット

細かな部位も使いやすい

スポットヘッドが付属。指や鼻など狭い部位のムダ毛まで逃さずフラッシュできます。ビキニラインのケアにも。




スポットヘッド

肌色
センサー

肌色センサーで最適レベルを自動調整

オートモードでは、お肌の色濃度をセンサーで読み取り、最適な光レベルを5段階で自動調整します。

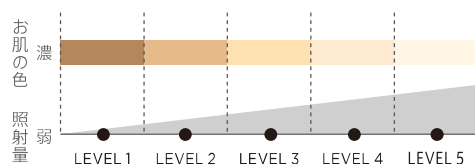

長寿
ランプ

照射回数最大60万回※3でランプ交換不要

最大60万回※3の長寿ランプを使用家族、夫婦、友達など複数人での併用も可能です。

家族で使える



サロン
限定

フォトモード※4搭載

for Salon限定モデルでは、あらたな機能としてフォトモード※4を搭載。赤、青、ピンク(赤と青同時出力)の3種のLEDを採用したことで、顔、ボディのトータルケアを実現しました。



赤色LED



青色LED



ピンクLED

<使用イメージ>



☑ お肌にかざして毎日使える


☑ ケアしづらい目元にも使える

レイボーテフラッシュの美肌ケアとは？

美肌 ケア


同時に美肌ケア

レイボーテフラッシュは、お肌に良い影響を与える可視光線580nm付近の波長を含んだキセノンフラッシュを採用。

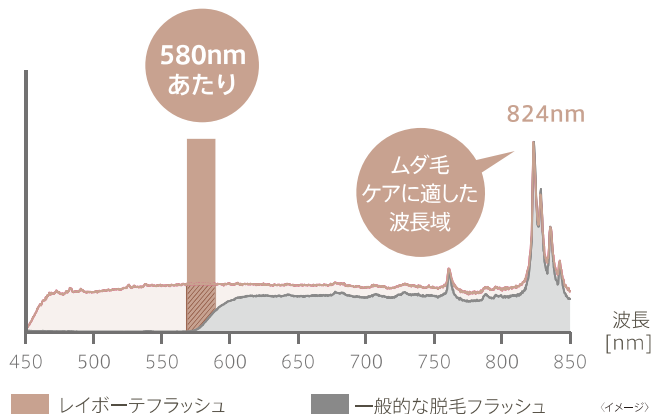

光美容 580nm付近の波長って？


光には色々な種類があります。よく知られている紫外線は、お肌にダメージを与える光。お肌に良い影響を与えるのは可視光線です。その中でもヤーマンは580nmに着目。

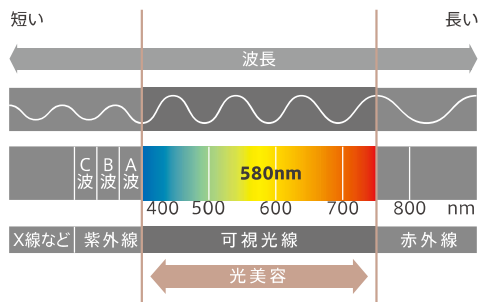

HOW TO USE

部位に合わせてモードの切替可能

ローラーモード

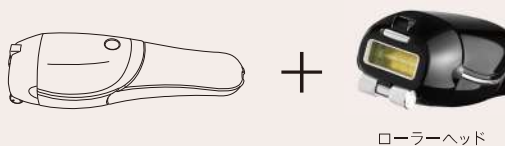

1. グリップを水平にし、ローラーモードにします。
 2. お肌の上を滑らせるように動かすことで、フラッシュが最大7発連続照射されます。
- 連続照射(最大7発)するごとに、数秒のチャージ時間があります

グリップを
水平に



〈オススメの使用部位〉

ウデ

アシ

シングルモード



1. グリップを倒してシングルモードにします。
 2. 照射ボタンを押して、位置を移動させながら1発ずつ照射します。
- 1発照射するごとに、数秒のチャージ時間があります

グリップを
倒す



〈オススメの使用部位〉

ワキ

フェイス

ビキニライン

ヒゲ

胸毛*

* 心臓の上をさけてご使用ください

ケア管理アプリ

アプリ連動(iOS)でお手入れがもっと便利に

- 次のお手入れのタイミングをお知らせ
- ローラーの最適な操作速度がわかる
「スピードトレーニング機能」で照射ムラを低減
- ローラーヘッドの交換時期をお知らせ

※Androidには対応していません



修理・交換のお問い合わせ

固定電話から 0570-550-637

携帯電話から 0570-550-637

受付時間：9～17時(土日祝日・年末年始除く)

付属品購入のお問い合わせはお電話から

WEB申込はこちら

