

独自開発 LIFT WAVE SYSTEM 採用

3D を超えた4D ドレナージュ

WAVY mini for Salon

販路限定品

価格 ¥31,900 (税込)

エステ級
ハンドケア

独自波形
LIFT WAVE

オートオフ機能

防滴仕様IPX4*

EMS強さレベル4段階

マイクロカレント、モイスチャーパルスを除く

*…生活防水に対応しており、浴室など水回りでの使用が可能です。但しシャワーなどの強い流水に対しての防滴仕様であり、水道の蛇口から出る強い水圧や水中には対応していません。


プロのハンドケアを再現

トルネードローラー ドレナージュ^{*1}

滑らせる角度や向きによって、全く異なった体感を与える独自トルネードローラーが、プロのハンドテクを再現。秘密は特許技術^{*2}により実現した、うねるような回転軌道。

お肌をしっかりとつかんでもみ流す、吸い付くような深い体感でトリートメントをします。

*1…エステ手技であり、人体への効果を示すものではありません。 *2…特許取得番号：5490968号

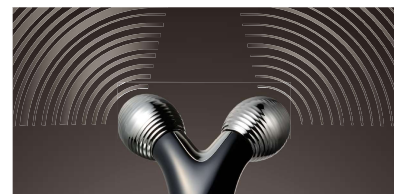

ウェービング加工

2つのローラー表面に施された波状のカッティングにより、お肌への高い密着性を実現。お肌にきめ細かい刺激をもたらします。

芯から輝くためのアプローチ

LIFT WAVE EMS ケア

従来のEMSに比べて、広い周波数域を使用し、深部の筋肉も効果的に刺激する独自波形「LIFT WAVE」EMSを搭載。

内側から凛と輝くような、芯からの美しさを目指します。

独自開発 LIFT WAVE SYSTEM

ヤーマンの特許技術^{*1}によって、つまんで流すエステ級のハンドケアを再現した『トルネードローラー』と、効果的に筋肉を刺激する『LIFT WAVE EMS』を組み合わせ、4Dドレナージュ^{*2}を実現した独自のシステムを開発しました。




マイクロカレント

微弱電流でお肌をトリートメント。体感はありません。




モイスチャー
パルスモード
(for Salon限定)

電気の力で美容成分をお肌へ浸透^{*3}させ、みずみずしい美肌に導きます。化粧水などと共にご使用ください。

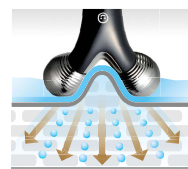

*…角質層まで

*1…特許取得番号：5490968号 *2…エステ手技であり、人体への効果を示すものではありません。

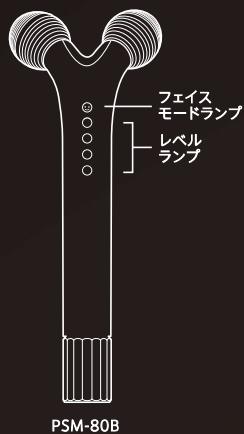

オートオフ機能

防滴仕様 IPX4

EMS強さレベル4段階

マイクロカレント、モイスチャーパルスを除く

3つのモードで集中フェイスクア

フェイスモード

心地よい刺激でお肌を目覚めさせ、より広範囲の波長で多くの表情筋にアプローチ

マイクロカレントモード

微弱電流でお肌をトリートメント。体感はいぼありません。

モイスチャーパルスモード

電気の力で美容成分をお肌へ浸透*させ、みずみずしい美肌に導きます。化粧水などと共にご使用ください。

*…角質層まで



for Salon
限定

HOW TO USE



フェイスライン (フェイス)

1. 首すじにそって上から下へ。
2. 額からこめかみに向かってジグザグに。
3. 口角から耳の横へ。
4. フェイスラインから耳の横へ。
5. 首すじにそって上から下へ。



口もと (フェイス)

ローラーでお肌を持ち上げるようにします。
1つのローラーのみを目もとの内側から優しく動かします。
もう一方のローラーは指をそえ、顔から浮かせてご使用ください。



デコルテ (フェイス)

1. 鎖骨にそって内から外へ。
2. 首すじにそって上から下へ。
3. 首の付け根から外側へ。



目もと (マイクロカレント モイスチャーパルス)

ローラーでお肌を持ち上げるようにします。
1つのローラーのみを目もとの内側から優しく動かします。
もう一方のローラーは指をそえ、顔から浮かせてご使用ください。



バスタイムをエステタイムに

WAVY mini for Salonは防滴タイプ*となっているため、バスタイムでの使用も可能です。一般的に体温が上がると代謝も上がると言われています。お風呂でのリラックスタイムを有効に活用して、効率良いフェイスクアを叶えます。

*…WAVY mini for Salon: IPX4相当



修理・交換・付属品購入のお問い合わせ

固定電話から ☎ 0120-776-282

携帯電話から ☎ 0570-550-637

受付時間: 9 ~ 17 時 (土日祝日・年末年始除く)

※付属品購入のお問い合わせはお電話から



修理・交換
WEB 申し込み