

HOW TO USE 使い方



フェイスライン (フェイス)

- 1.首すじにそって上から下へ。
- 2.額からこめかみに向かってジグザグに。
- 3.口角から耳の横へ。
- 4.フェイスラインから耳の横へ。
- 5.首すじにそって上から下へ。



口もと (フェイス)

ローラーでお肌を持ち上げるようにします。



目もと

1つのローラーのみを目もとの内側から優しく動かします。もう一方のローラーは指をそえ、顔から浮かせてご使用ください。



デコルテ (フェイス)

- 1.鎖骨にそって内から外へ。
- 2.首すじにそって上から下へ。
- 3.首の付け根から外側へ。

販路限定品



品名: 家庭用美容器	充電台: USBケーブル(USB Type-A)付
型名: WAVY mini for Salon	防水機能: IPX4
型番: PSM-80B	外形寸法: 本体/約W58×D40×H145 (mm)
電源: DC5V 0.5A	製品質量: 本体/約70g
消費電力: 約1W	材質: 本体/ABS樹脂、ポリカーボネート
使用電池: リチウムイオン蓄電池	ローラー/ABS樹脂(クロムメッキ)
充電時間: 約3時間	製造国: 日本
※充電環境によって、充電時間は前後します。	付属品: 充電台 1個、ACアダプター 1個

▲ 購入前のご注意

- 商品パッケージまたは商品カタログで「安全に関するご注意」をご確認ください。ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。
- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
- カタログと実物では多少色味が異なる場合があります。●実際の商品には注意ラベルなどが貼ってあるものがあります。

製造販売元

ヤーマン株式会社 東京都江東区古石場 1-4-4

商品に対する詳しいご説明・お問い合わせは下記URLまたはヤーマンコールセンターまで

〈ヤーマンコールセンター〉受付9:00~17:00(土・日・祝日除く)

固定電話など ☎ 0120-776-282 (通話料無料) URL: <https://ymn.cm/pro>
 携帯電話・PHS 📞 0570-550-637 (通話料有料) MAIL: professional@ya-man.com



深く届く、
綺麗を呼び覚ます。

WAVY mini for Salon

独自開発 LIFT WAVE SYSTEM採用

3Dを超えた4Dドレナージュ美容器^{※1}

エステ級
ハンドケア

独自波形
LIFT WAVE

プロのハンドケア
を再現

芯から輝くための
アプローチ

トルネードローラー

ドレナージュ^{※1}

滑らせる角度や向きによって、全く異なった体感を与える独自トルネードローラーが、プロのハンドテクを再現。秘密は特許技術^{※2}により実現した、うねるような回転軌道。お肌をしっかりとつかんでもみ流す、吸い付くような深い体感でトリートメントをします。

ウェービング加工

2つのローラー表面に施された波状のカッティングにより、お肌への高い密着性を実現。お肌にかめ細かい刺激をもたらします。


LIFT WAVE EMS

トリートメント

従来のEMSに比べて、広い周波数域を使用し、深部の筋肉も効果的に刺激する独自波形「LIFT WAVE」EMSを搭載。内側から凛と輝くような、芯からの美しさを目指します。

独自開発 LIFT WAVE SYSTEM

ヤーマンの特許技術^{※2}によって、つまんで流すエステ級のハンドケアを再現した『トルネードローラー』と、効果的に筋肉を刺激する『LIFT WAVE EMS』を組み合わせ、4Dドレナージュ^{※1}を実現した独自のシステムを開発しました。

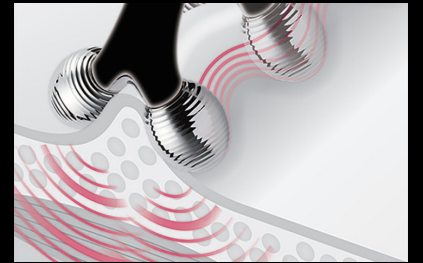

LIFT WAVE SYSTEMイメージ

3つのモードで集中フェイスクア

フェイスモード

心地よい刺激でお肌を目覚めさせ、より広範囲の波長で多くの表情筋にアプローチ

マイクロカレントモード

微弱電流でお肌をトリートメント。体感はほぼありません。

モイチャーパルスモード

電気力で美容成分をお肌へ浸透^{※3}させ、みずみずしい美肌に導きます。化粧水などと共にご使用ください。




for Salon
限定

オートオフ機能

防滴仕様 IPX4

EMS強さレベル4段階
マイクロカレント、モイチャーパルスを除く

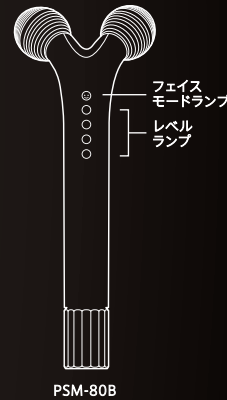

PSM-80B