

全国のサロン様とお客様の声をもとに進化し続ける キャビスパ for Pro シリーズ

2015年に初代「キャビスパ for Pro」が発売されて以来、全国のサロン様にご愛顧いただく中で、多くのお客様からのフィードバックもいただいてまいりました。その一つ一つにお応えするべく、改善を積み重ねてきた当シリーズの4代目となる「プレミア II」は、3機能全てを進化させ、より多様な悩みやお客様の体の状態に合わせたオーダーメイドトリートメントが可能になりました。



キャビスパ for Proプレミア II と
一緒にお使いください

メソスタイルゲルプレミア
500g 6,930円(税込)

肌引き締め効果のある美容成分*を配合
キャビテーション・ラジオ波・EMSに使用可能なので
塗り替えなしでコスト削減・時間短縮

*…ホスファチジルコリン



製品名	キャビスパ for Pro プレミア II	消費電力	最大約30W
サロン価格	お問合せ下さい	機能	キャビテーション— 周波数：40kHz
外形寸法	約190×110×110mm(本体のみ)		RF ————— 周波数：3MHz
質量	約500g		Burst EMS ————— 周波数帯：低周波～高周波 (5～100kHz)
電源	AC100 ～ 240V 50/60Hz	付属品	ACアダプター、スタンド、メソスタイルゲルプレミア 500g

販売元

ヤーマン株式会社 東京都江東区古石場1-4-4

製品に対する詳しいご説明・お問い合わせは下記URL、またはヤーマンコールセンターまで。
※付属品購入のお問い合わせはお客様センターにて承ります。

ヤーマンコールセンター 受付9:00 ～ 17:00 (土日祝日除く)

0120-776-282 (通話料無料)

携帯電話・PHSからは **0570-550-637** (通話料有料)

<https://ymn.cm/pro>

ご購入前に、商品パッケージまたは商品カタログで「安全に関するご注意」をご確認ください。
ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
印刷物と実物では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
この商品の詳細については、販売店または当社におたずねください。
このカタログの記載内容は2023年10月現在のものです。

PRO-CAVI-2023-01

YA-MAN
PROFESSIONAL
公式サイト



ボディケアの最高峰*

Cavispa for Pro Premier II

キャビスパ for Pro プレミア II

業務用機器

*…キャビスパ for Proシリーズ史上最高



ボディケアの常識が変わる

さらにパワーアップした3機能を同時出力で圧倒的な体感へ

HOW TO USE


使い方動画はこちら



01 キャビテーション

40kHzのキャビテーションで気になる部分にアプローチ

キャビテーションとは、特殊な超音波を集中的にあてることで、気になる部分にアプローチする技術。高い効果が期待できる40kHzの周波数を採用。出力が約120%*UP、レベルも5段階となり、さらに効率的なトリートメントが可能です。

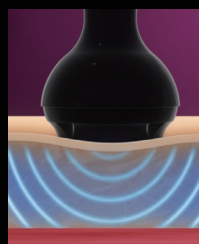

イメージ図


* … キャビスパ for Pro プレミアとの比較

03 Burst EMS 低～高周波搭載（5～100kHz）

低～高周波を複合的に組み合わせた独自波形によって、さらに効率よく筋肉を刺激

EMSとは電気刺激により筋肉を運動させるテクノロジー。従来のEMSに使用される低周波だけでなく、中周波・高周波を採用。レベル4以降のパルス幅を約114%～150%長くした*1ことで、筋肉の動きがより感じやすくなりました。ま

*1 … キャビスパ for Pro プレミアとの比較 *2 … エステの手法のこと

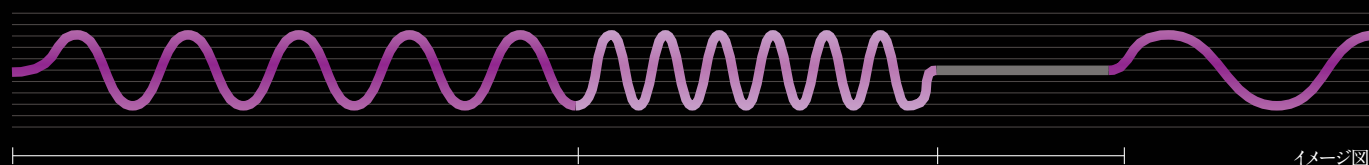

筋肉を大きく刺激

深層筋を細かく刺激

筋肉への刺激を
一時的に休止

イメージ図



女性の小さな手でも使いやすい直径約8cmのプロープヘッドを採用

直径を2cm小さくした*3ことで、広範囲の部位だけでなく、腕や腰などの細いラインも効率的にトリートメントいただけます。より女性の小さな手にもフィットし、ハンドトリートメントとの併用もしやすくなりました。

*3 … キャビスパ for Pro、キャビスパ for Pro Limited Modelとの比較

02 RF（ラジオ波）＋

平行電極ヘッド（特許第6491092号）

独自技術のRFによって体の奥から温める*2

ヤーマンの独自技術である「RFリフトテクノロジー」を採用。平行電極ヘッドは「面」でとらえる特殊形状によってより広範囲を効率的に温めることを可能とし、ボディにアプローチします。約130%*1UPした3MHzの高周波によって、体の奥*2から温めます。

*1 … キャビスパ for Pro プレミアとの比較 *2 … 角質層まで



イメージ


レベル4以上の
筋肉の動き
体感改善

3種類の機能を同時出力可能

パワーアップした3機能同時出力によって、高い満足度&トリートメント時間の削減

従来のマシンでは、RF→キャビテーション→EMSをそれぞれ単独でトリートメントしていましたが、キャビスパ for Pro シリーズは3種類の機能を同時出力を実現。超音波振動によるキャビテーションに加えて、ラジオ波による温熱、Burst EMSによる筋肉刺激を組み合わせた複合的なトリートメントで集中アプ

ローチ。短時間で効率的なトリートメントを実現しました。さらに、同時出力することによって機器によるトリートメント時間が短縮されることにより回転率がアップ。また、残りの時間をハンドトリートメントなどにあてることで、従来マシンでのメニューに比べ、同じ時間でも高いお客様満足度を実現します。

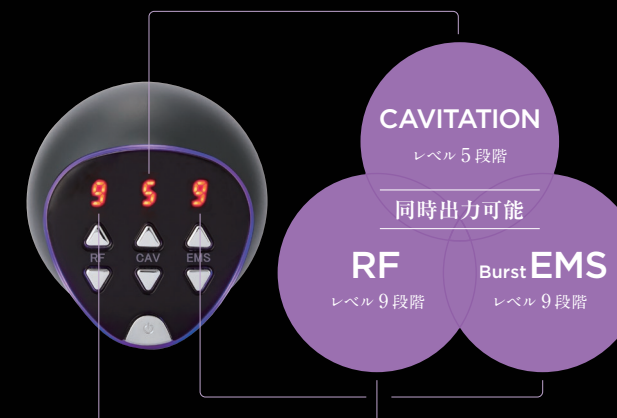

オーダーメイド
トリートメントを実現

各機能ごとのレベルの切り替えが可能です。お客様一人一人の体の状態やニーズに応じて最適なトリートメントができます。


一般的な
メニュー



RF 20分



CAVI 20分

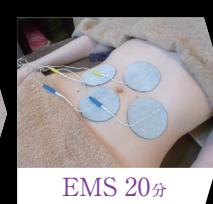

EMS 20分

各機能
それぞれ使用
約60分

30～40分短縮

キャビスパ
for Pro
プレミア II



CAVI+RF+EMS 20～30分

ハンドトリートメント
約30分

ヒートマット
約20分

ハンド
約20分

機器による
トリートメント時間を
30～40分
短縮！

