



クイーンリフト for Pro クリアプラス

サロン価格	お問合せください
外形寸法 (本体)	約 W313×H132×D244 (mm)
重量 (本体)	約3.2kg
電源	DC12V 3.0A
消費電力	約21W
周波数	ピーリング：90kHz ラジオ波：3MHz 超音波：1MHz EMS：低～高周波
製造国	日本
セット内容	本体(プローブ4種・手元電極含む) プローブホルダー、ACアダプター、 ネジ2ヶ(プローブホルダー用)

ヤーマン史上最高*の
フェイシャルマシン



クイーンリフト for Pro クリアプラス

業務用機器

Made in Japan

製造元

ヤーマン株式会社

東京都江東区東陽2-4-2 新宮ビル

TEL : 03-5665-1177 (受付時間 平日9:00~17:00)

FAX : 03-5665-8752

MAIL: professional@ya-man.com

WEB : https://ymn.cm/pro





進化型デザイン フェイシャルマシン クイーンリフト for Pro クリアプラス

クイーンリフト for Pro クリアプラスは1台で毛穴汚れとお顔のもたつきを徹底ケアできるヤーマン史上最高*1の業務用フェイシャルマシン。
ヤーマンの独自技術を結集した4つのプローブを搭載。8種類もの機能が最適にプログラミングされ、より満足度の高いフェイシャルコースが可能に。

NEW 1/ ソニックピール プローブ

毛穴の詰まりに **PEELING 90kHz** **ION Cleansing**
ヤーマン独自のカップ形状のヘッドが、お肌を優しく面ですくって、Tゾーン、Uゾーンにしっかりフィット。毎秒約90,000回の超音波振動とイオン導出により、詰まり毛穴をスッキリさせます。



2/ サーモソニック プローブ

肌表面(角質層)のもたつきに **RF 3MHz** **SONIC 1MHz**
特許技術のラジオ波と超音波を搭載。3MHzのラジオ波で深層*2温熱トリートメント。さらに、超音波のダブルの力で肌にアプローチします。



3/ 美創筋EMS プローブ

肌の土台(角質層)のケアに **EMS E.F.H.F.**
特殊な4電極によるドレナージュタッピングシステムにより、普段使わずに固くなった筋肉を刺激。お顔を引き上げるようにケアすれば、理想の美フェイスへ導きます。



4/ TPS 導入 プローブ


独自技術TPSで深部*2までケア **TPS** **BLUE LED** **COOL**
ヤーマン史上最高*1の導入技術TPSを採用。モードを切替えれば、クール機能(冷却×青色LED)でお肌の引き締めも可能。




4つのプローブ

新機能「ソニックピールプローブ」 ヤーマン独自のカップ形状で毛穴汚れを除去

PM2.5*3対応
90kHzの超音波振動が頑固な毛穴汚れをケア。さらにイオンの力で汚れを浮かせて、詰まり毛穴もスッキリ。PM2.5*3対応のヤーマン独自のカップ形状のヘッドでお肌を優しく捉え、古い角質をスッキリ除去します。

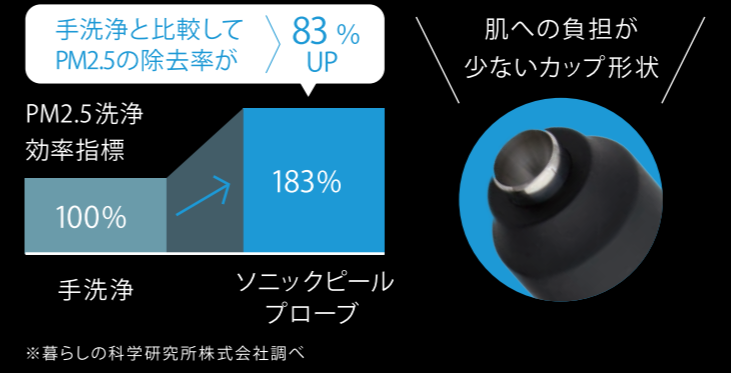


毛穴の黒ずみ減少
高い洗浄力により、気になる毛穴の黒ずみもしっかりオフ。回転ブラシを使用したときと比較して、目立つ毛穴の数が約32%減少しました。

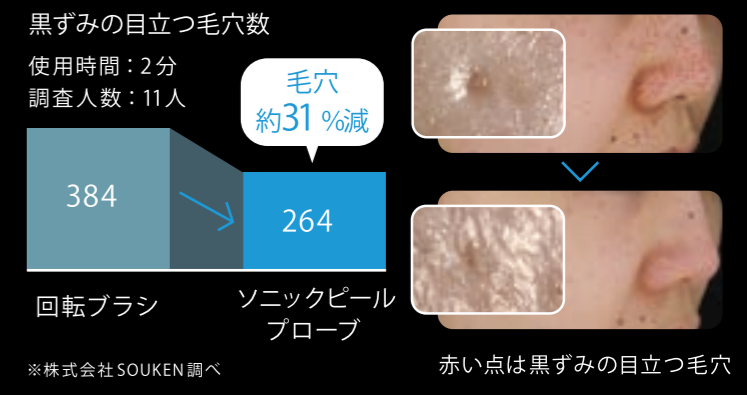

独自技術のRFリフトテクノロジー

独自技術の特殊円状フラット電極ヘッド(特許第6212608号)を搭載。お肌を面ですくって二重リングの特殊なヘッドによって、従来の美顔器に比べてより広範囲を深く*2温熱することを可能としました。

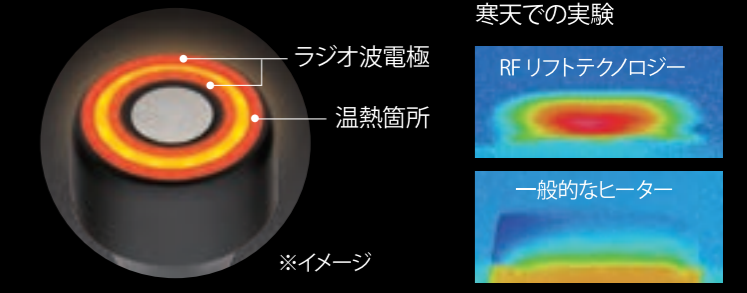

ヤーマン史上最高のTPS 導入

TPS(Triple Penetration System)とは、橙LED×イオン導入×ハイパーパルスの3つの導入機能を組み合わせて生まれたヤーマン史上最高*1の導入技術のこと。



おすすめコース例 クイーンリフト コース

所要時間 約70分
肌表面のケアから複合的な原因で起こるお顔のもたつきまで、4つのプローブで徹底ケア。お客様のニーズに結果で応えるフェイシャルコースをこれ1台で。

1 クレンジング(5分) + 洗顔(6分)

2 超音波ピーリングトリートメント (5分)

3 深層温熱トリートメント (8分)

4 ドレナージュ (8分)

5 美創筋EMS トリートメント (12分)

6 TPS 導入 トリートメント (10分)

7 冷却引き締め (3分)

*1...ヤーマン業務用機器として *2...角質層 *3...2.5μm以下の微粒子状物質の総称です。また、有害物質のすべてを除去できるものではありません。

ヤーマン史上最高*の
フェイシャルマシン



クイーンリフト for Pro クリアプラス

業務用機器

Made in Japan

進化型デザイン フェイシャルマシン

クイーンリフト for Pro クリアプラス

クイーンリフト forPro クリアプラスは1台で毛穴汚れとお顔のもたつきを徹底ケアできるヤーマン史上最高*1の業務用フェイシャルマシン。

ヤーマンの独自技術を結集した4つのプローブを搭載。8種類もの機能が最適にプログラミングされ、より満足度の高いフェイシャルコースが可能に。

NEW 1/ ソニックピール プローブ

毛穴の詰まりに

PEELING
90kHz

ION
Cleansing

ヤーマン独自のカップ形状のヘッドが、お肌を優しく面で捉え、Tゾーン、Uゾーンにしっかりフィット。毎秒約90,000回の超音波振動とイオン導出により、詰まり毛穴をスッキリさせます。

手元
電極

2/ サーモソニック プローブ

肌表面(角質層)の
もたつきに

RF
3MHz

SONIC
1MHz

特許技術のラジオ波と超音波を搭載。3MHzのラジオ波で深層 *2 温熱トリートメント。さらに、超音波のダブルの力でお肌にアプローチします。

4つのプローブ

3/ 美創筋EMS プローブ

肌の土台(角質層)のケアに

EMS
E.F.-H.F.

特殊な4電極によるドレナージュタッピングシステムにより、普段使わずに固くなった筋肉を刺激。お顔を引き上げるようにケアすれば、理想の美フェイスへ導きます。

4/ TPS 導入 プローブ

独自技術TPSで
深部*2までケア

TPS

BLUE
LED

COOL

ヤーマン史上最高*1の導入技術TPSを採用。モードを切替えれば、クール機能(冷却×青色LED)でお肌の引き締めも可能。


手元
電極

新機能「ソニックピールプローブ」 ヤーマン独自のカップ形状で毛穴汚れを除去

PM2.5*³対応

90kHzの超音波振動が頑固な毛穴汚れをケア。さらにイオンの力で汚れを浮かせて、詰まり毛穴もスッキリ。PM2.5 *³対応のヤーマン独自のカップ形状のヘッドでお肌を優しく捉え、古い角質をスッキリ除去します。

手洗浄と比較して
PM2.5の除去率が **83% UP**

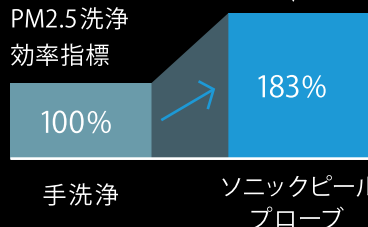

※暮らしの科学研究所株式会社調べ

肌への負担が
少ないカップ形状




毛穴の黒ずみ減少

高い洗浄力により、気になる毛穴の黒ずみもしっかりオフ。回転ブラシを使用したときと比較して、目立つ毛穴の数が約32%減少しました。


黒ずみの目立つ毛穴数

使用時間：2分
調査人数：11人

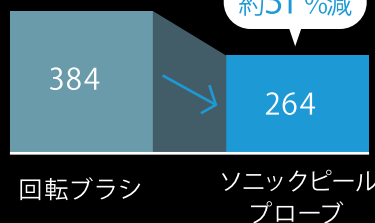

※株式会社 SOUKEN 調べ


毛穴
約31%減

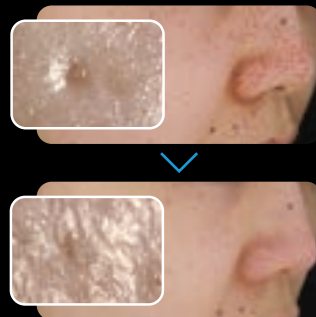


赤い点は黒ずみの目立つ毛穴

独自技術のRFリフトテクノロジー

独自技術の特殊円状フラット電極ヘッド(特許第 6212608号)を搭載。お肌を面とらえる二重リングの特殊なヘッドによって、従来の美顔器に比べてより広範囲を深く*2温熱することを可能としました。

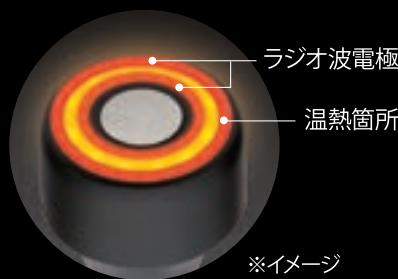


寒天での実験

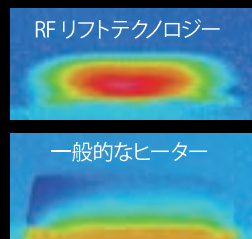

ヤーマン史上最高のTPS導入

TPS(Triple Penetration System)とは、橙LED×イオン導入×ハイパーパルスの3つの導入機能を組み合わせて生まれたヤーマン史上最高*1の導入技術のこと。

TPS Triple Penetration System

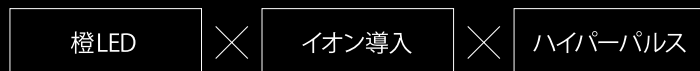

おすすめコース例 クインリフトコース

所要時間 約70分

肌表面のケアから複合的な原因で起こる顔のもたつきまで、4つのプローブで徹底ケア。お客さまのニーズに結果で応えるフェイシャルコースをこれ1台で。

1 クレンジング(5分) + 洗顔(6分)



ソニックピールプローブ
2 超音波ピーリング
トリートメント (5分)



サーモソニックプローブ
3 深層温熱
トリートメント (8分)



美創筋EMSプローブ
4 ドレナージュ (8分)



美創筋EMSプローブ
5 美創筋EMS
トリートメント (12分)



TPS導入プローブ
6 TPS導入
トリートメント (10分)



TPS導入プローブ
7 冷却引き締め (3分)



クイーンリフト for Pro クリアプラス

サロン価格	お問合せください
外形寸法 (本体)	約 W313×H132×D244 (mm)
重量 (本体)	約3.2kg
電源	DC12V 3.0A
消費電力	約21W
周波数	ピーリング：90kHz ラジオ波：3MHz 超音波：1MHz EMS：低～高周波
製造国	日本
セット内容	本体(プローブ4種・手元電極含む) プローブホルダー、ACアダプター、 ネジ2ケ(プローブホルダー用)

製造元

ヤーマン株式会社

東京都江東区東陽2-4-2 新宮ビル

TEL : 03-5665-1177 (受付時間 平日9:00～17:00)

FAX : 03-5665-8752

MAIL: professional@ya-man.com

WEB : <https://ymn.cm/pro>

